



ชุดทดสอบโปรตีนตกค้าง

ชุด Swab

โปรตีนรวม

(Cat. No. M2401)



ส่วนประกอบในชุดทดสอบ

- ชุดทดสอบ* (ซองละ 50 ชิ้น)
* รวมทั้ง: ชุด Swab & น้ำยา
- คู่มือ

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- ตรวจหาโปรตีนได้อย่างรวดเร็ว
- สำหรับการ Swab พื้นผิว
- ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

- ELISA Kit II
- Rapid Test Pro II
- Rapid Test Easy

ประสิทธิภาพ

เวลาเตรียมตัวอย่าง

ไม่ต้องเตรียม


เวลาทดสอบ

ไม่กี่วินาที


LOD

10 µg


ขั้นตอนการใช้งาน

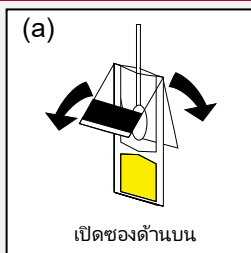


เปิดช่องด้านบน

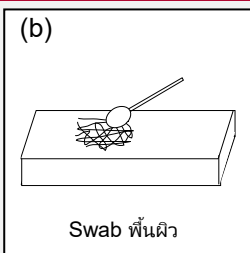

Swab พื้นผิว

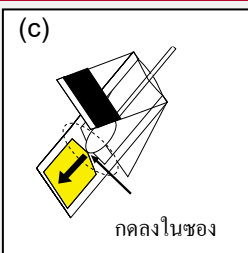


กดลงในช่อง

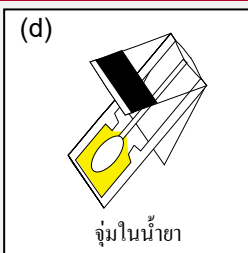

จุ่มในน้ำยา



อ่านผลทันที

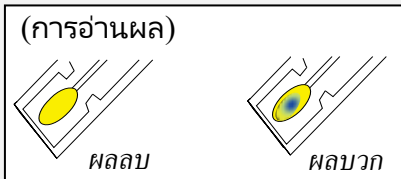


สำหรับการละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านในคู่มือ

- ในสารละลายกรด ประจุลบของสีน้ำยาที่แยกตัวออกจะจับกับตำแหน่งที่มีประจุบวกของโปรตีน (ดังภาพด้านล่าง)
- จากการเปลี่ยนแปลงความขาคลิ้นในการดูดซับ สีของน้ำยาที่จับกับโปรตีนจะแตกต่างจากสีน้ำยาปกติ
- หากมีโปรตีนในน้ำยาสีจะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนสีเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของโปรตีน

(อ้างอิง: Y. Suzuki, *Anal Sci.* 2001 Nov;17(11):1263-8.)

รูปภาพ : สีน้ำยาจับกับโปรตีนที่มีประจุบวก

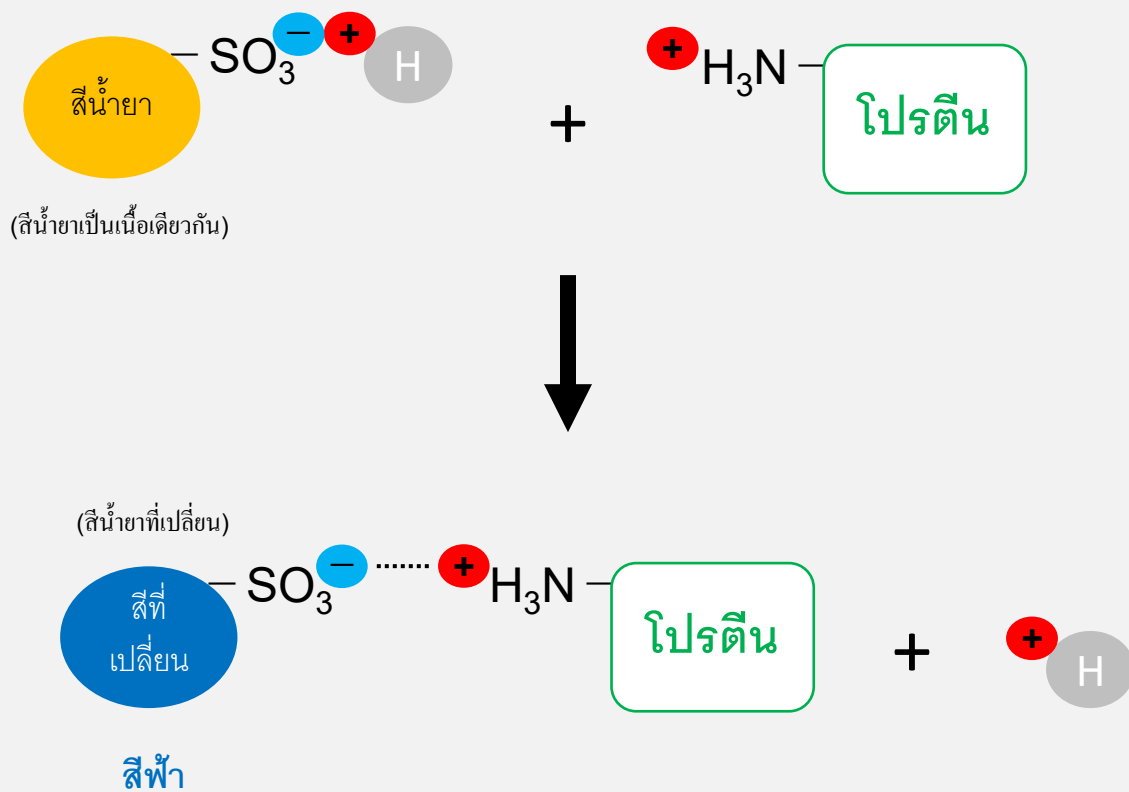

Morinaga BioScience, Inc.
2-1-1 Shimosueyoshi,
Tsurumi-ku, Yokohama-shi,
230-8504
JAPAN



www.miobs-e.com/tha/index.html



jieb.orapin.bj@morinaga.com



TEL +66-8-9760-4849